

Waga Mi z analizatorem pomiaru składu ciała 2

Instrukcja użytkownika



Tłumaczenie instrukcji oryginalnej



Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Wkładanie baterii

Otwórz pokrywę komory baterii, a następnie włóż cztery baterie AAA zgodnie z oznaczeniem biegunów.

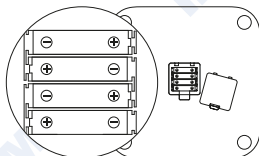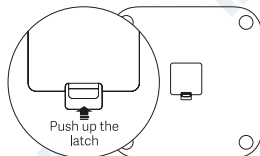

Pobieranie aplikacji

Zeskanuj kod QR, a następnie pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji „Mi Fit”, lub wyszukaj ją w Google Play, App Store lub innych sklepach z aplikacjami.



Parowanie wagi przez Bluetooth

Aby sparować urządzenie z aplikacją Mi Fit, zaloguj się do niej za pomocą swojego loginu Mi, następnie nawiąż połączenie Bluetooth pomiędzy wagą a kontem i wprowadź swoje dane osobowe zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po sparowaniu wagi możesz sprawdzić historię ważenia i informacje o masie ciała używając aplikacji Mi Fit oraz aplikacji Mi Home/Xiaomi Home*.

* W Europie (z wyjątkiem Rosji) ta aplikacja nazywa się Xiaomi Home. Nazwa aplikacji wyświetlana na urządzeniu powinna być traktowana jako domyślna.

Dane osobowe są wykorzystywane do analizy masy ciała. Aby zapewnić dokładność wyników, prosimy o podanie dokładnych danych osobowych.

Ważenie i pomiary zawartości tłuszczu


W pierwszej kolejności, połóż wagę na twardej, płaskiej podłodze.

Wejdź boso na wagę, tak jak pokazano na rysunku. Upewnij się, że powierzchnia stóp jest odpowiednio połączona z czterema metalowymi elektrodami na wadze.

Po zakończeniu pomiaru, waga rozpocznie analizę masy ciała.

Proces zostanie zakończony, gdy pasek stanu poniżej wskaźnika masy zacznie migać.

Wyniki analizy możesz zobaczyć na telefonie.

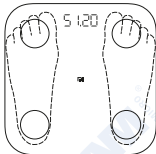


Dane dotyczące masy ciała podane przez wagę mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być uznawane za poradę lekarską.

Ważenie przedmiotów


W pierwszej kolejności, połóż wagę na twardej, płaskiej powierzchni. Następnie naciśnij wagę, aby ją włączyć. Poczekać, aż pojawi się napis „0,00” i umieść przedmiot na wadze. Przesuwanie lub stukanie wagi może mieć wpływ na dokładność. Jeśli waga została przesunięta, ponownie zważ element, aby upewnić się, że pomiar jest dokładny.

Ostrzeżenia

Podczas ważenia, migająca litera „L” oznacza niski poziom naładowania baterii. W takim wypadku jak najszybciej wymień baterie.

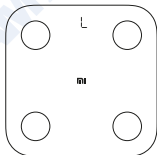

Podczas ważenia, migający napis „OL” oznacza, że waga jest przeciążona powyżej maksymalnej nośności wynoszącej 150 kg.

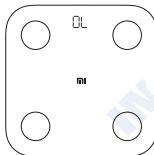

Wybór jednostki wagi

Waga domyślnie wyświetla obliczenia w kilogramach (kg).

Możesz zmienić jednostkę wagi za pomocą ustawień urządzenia w aplikacji Mi Fit.

Waga może wyświetlać wagę w kilogramach (kg) i funtach (lb).

Środki ostrożności

1. Aby zapobiec poślizgnięciu się, nie należy umieszczać wagi na śliskim podłożu ani używać jej, gdy stopy lub waga są mokre.
2. Za każdym razem należy stać na środku wagi, aby zapobiec jej przypadkowemu przechyleniu się podczas użycia.
3. Wagę należy stosować wyłącznie w suchym środowisku i nie zanurzać jej w wodzie.
4. Aby wyczyścić wagę, należy wytrzeć jej powierzchnię wilgotną szmatką i łagodnym detergentem. Nie należy stosować żadnych rozpuszczalników organicznych ani innych substancji chemicznych.
5. Po wyczerpaniu baterii należy je natychmiast wymienić, aby uniknąć potencjalnego wycieku i korozji.
6. Nie zaleca się używania tej wagi przez osoby z rozrusznikiem serca lub innymi wszczepionymi urządzeniami medycznymi. Dokładność danych dotyczących masy ciała może się różnić w przypadku stosowania ich przez zawodowych sportowców, kobiety w ciąży i inne osoby ze specjalnymi uwarunkowaniami.
7. Możesz użyć aplikacji Mi Fit, aby skorzystać z funkcji testu balansu – stania na jednej nodze z zamkniętymi oczami (One-foot-stand with Eyes Closed Measurement). Kiedy utracisz równowagę, upewnij się, że po otwarciu oczu stoisz stabilnie na podłożu, aby zapobiec przypadkowemu przewróceniu się. Wszyscy, w tym dzieci, osoby starsze, matki w ciąży i inne osoby z problemami na tle fizycznym lub z równowagą, powinni korzystać z tej funkcji z rozwagą.

Informacje dot. unieszkodliwienia i recyklingu



Symbol ten wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać z odpadami komunalnymi. Należy pamiętać o przekazaniu urządzenia do bezpiecznego dla środowiska recyklingu zostawiając go we właściwym punkcie selektywnej zbiórki odpadów w celu ponownego wykorzystania materiałów.

Certyfikaty i autoryzacje bezpieczeństwa



Anhui Huami Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu XMTZC05HM jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Dane techniczne

Wymiary: 300 mm x 300 mm x 25 mm

Waga: 1,7 kg

Zakres pomiaru: 100 g - 150 kg

Jednostki pomiaru masy: kg/lb

Przyrost: 0,1 kg/lb

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.0

Temperatura robocza: 0°C ~ 40°C

Częstotliwość: 2402 – 2480 MHz

Maks. Moc wyjściowa: 0 dBm

Zasilanie: cztery baterie AAA 1,5 V

Materiał obudowy: szkło hartowane, tworzywo techniczne ABS

Urządzenie kompatybilne z: Android 4.4 lub iOS 9.0 (iPhone 5S i nowszymi wersjami)
i nowszymi wersjami, Bluetooth 4.0 i nowszymi wersjami.

Waga Mi z analizatorem pomiaru składu ciała 2

Model: XMTZC05HM

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Producent: Anhui Huami Technology Co., Ltd. (firma w ekosystemie MI)

Adres: Room 1201, Building A4, National Animation Industry Base, No. 800 Wangjiang West Road, Gaoxin District, Hefei, Anhui, China

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.mi.com

Importer i dystrybutor:

Ingram Micro sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 46

02-255 Warszawa

<https://pl.ingrammicro.eu>